

Brožurka uživatele Deníku mySugr

Version: 3.93.0_iOS - 2024-04-03

1 Indikace použití

1.1 Zamýšlené použití

Deník mySugr (aplikace mySugr) se používá na podporu léčby cukrovky prostřednictvím každodenní správy dat souvisejících s cukrovkou. Cílem aplikace je podpořit optimalizaci léčby. Můžete ručně vytvářet záznamy v deníku, které obsahují informace o léčbě inzulinem, aktuální a cílové hladině glykémie, příjmu sacharidů a také podrobné údaje o vašich aktivitách. Dále můžete synchronizovat další zařízení používaná v rámci léčby, například glukometry, čímž minimalizujete chyby vznikající při ručním zadávání hodnot a zvýšíte svou jistotu při používání.

Deník mySugr podporuje optimalizaci léčby dvěma způsoby:

- 1) Monitorování: Díky monitorování vašich každodenních hodnot můžete lépe rozhodovat o záležitostech souvisejících s léčbou. Rovněž můžete vytvářet zprávy s údaji o léčbě, které můžete probrat s vaším lékařem.
- 2) Dodržování nastavené léčby: Deník mySugr dodává motivaci pomocí výzev, poskytuje feedback k aktuálnímu stavu léčby a také různé odměny, které vás motivují dodržovat nastavenou léčbu, a tím pomáhají s ní zvyšovat soulad.

1.2 Pro koho je určen Deník mySugr?

Deník mySugr jsme vyvinuli na míru pro všechny:

- kterým byla diagnostikována cukrovka,
- kterým je nejméně 16 let,
- kteří jsou v péči lékaře nebo jiného profesionálního zdravotníka,
- kteří jsou fyzicky a duševně schopni samostatně řídit léčbu své cukrovky,
- dovedou používat smartphone.

1.3 Na kterých zařízeních funguje Deník mySugr?

Deník mySugr lze používat na libovolném zařízení se systémem iOS ve verzi 16.2 nebo novější. K dispozici je také pro většinu smartphonů se systémem Android ve verzi 9.0 nebo novější. Deník mySugr by se neměl používat na zařízeních s rootem nebo jailbreakem.

1.4 Prostředí pro používání

Deník mySugr je mobilní aplikace. Jako takovou ji lze používat v libovolném prostředí, kde se obvykle používá smartphone, a proto není omezena na použití ve vnitřních

prostorách.

2 Kontraindikace

Nejsou známy

3 Varování



3.1 Lékařské poradenství

Deník mySugr je určen k podpoře léčby cukrovky, avšak nedokáže nahradit návštěvu vašeho lékaře / pracovníků diabetologické péče. Nadále je nezbytné, abyste si nechali pravidelně odborně posuzovat dlouhodobé hodnoty glykémie (HbA1c), a musíte pokračovat v nezávislém řízení hladiny glykémie.

3.2 Doporučené aktualizace

Chcete-li zajistit bezpečný a optimalizovaný chod Deníku mySugr, doporučujeme nainstalovat aktualizace softwaru, jakmile budou k dispozici.

4 Hlavní vlastnosti

4.1 Souhrn

Cílem aplikace mySugr je zjednodušit vám každodenní kontrolu cukrovky a celkově optimalizovat její léčení. To je však možné jen tehdy, pokud se na tom budete aktivně a intenzivně podílet. Důležité je zejména pravidelné zadávání informací do aplikace. Abychom vám dodali motivaci a zachovali váš zájem, přidali jsme do aplikace mySugr několik poutavých prvků. Je důležité, abyste zadávali co nejvíc informací a byly k sobě naprosto upřímní. Jen tak budete moci těžit ze zaznamenávání údajů. Zadávání chybných nebo zkreslených dat vám nijak nepomůže.


Klíčové vlastnosti aplikace mySugr:

- bleskové zadávání dat,
- individuálně přizpůsobená obrazovka pro zápis údajů,
- podrobná analýza vašeho dne,
- šikovné funkce pro přidávání fotek (ke každému záznamu jich lze přidat několik),
- vzrušující výzvy,
- zprávy v různých formátech (PDF, CSV, Excel),
- přehledné grafy,
- užitečné připomínky měření glykémie (k dispozici pouze v určitých zemích),
- integrace do aplikace Zdraví,
- bezpečné zálohování dat,
- rychlá synchronizace s více zařízeními,
- integrace glukometrů Accu-Chek Aviva/Performa Connect/Guide/Instant/Mobile,
- integrace glukometru Beurer GL 50 evo (pouze Německo a Itálie),
- integrace glukometru Ascensia Contour Next One (podle dostupnosti),
- integrace per Novo Pen 6 / Novo Pen Echo+.

UPOZORNĚNÍ: Úplný seznam dostupných zařízení naleznete v sekci „Připojení“ v aplikaci mySugr.

4.2 Hlavní vlastnosti

Rychlé a snadné zadávání dat.

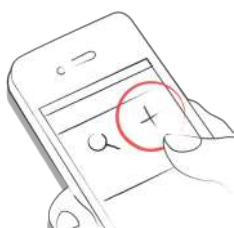

Inteligentní vyhledávání.



Úhledné a jasné grafy.



Šikovná foto funkce (ke každému záznamu lze přidat několik fotek).



Vzrušující výzvy.



Zprávy v různých formátech – PDF, CSV, Excel (PDF a Excel jen v mySugr PRO).



Feedback, který vám vykouzlí úsměv na tváři.



Pratické připomínky měření glykémie.



Rychlá synchronizace s více zařízeními (mySugr PRO).



5 Začínáme

5.1 Instalace

Na zařízení se systémem iOS otevřete aplikaci App Store a vyhledejte „mySugr“. Klepnutím na ikonu aplikace zobrazíte podrobnosti, stiskněte tlačítko „Získat“ a pak tlačítkem „Instalovat“ spustíte instalaci. Zařízení se vás může dotázat na heslo k App Storu. Jakmile ho zadáte, aplikace mySugr se začne stahovat a nainstaluje se.



Chcete-li používat aplikaci mySugr, musíte si vytvořit účet. To je nezbytné pro pozdější exportování dat.



5.2 Úvodní obrazovka

Dvě nejčastěji používané funkce jsou **lupa**, která slouží k vyhledávání záznamů (mySugr PRO), a **znaménko plus**, kterým vytváříte nové záznamy.



Pod grafem se zobrazuje statistika pro aktuální den:


- průměrná glykémie,
- odchylka glykémie,
- hypoglykémie a hyperglykémie.

Pod nimi najdete pole s informacemi o jednotkách inzulínu, sacharidech a s dalšími údaji.



Pod grafem se nacházejí dlaždice, které obsahují následující informace o nastavených dnech:

- průměrná glykémie
- odchylka glykémie
- počet hyperglykemií a hypoglykemií
- poměr inzulínu
- bolus nebo inzulín aplikovaný při jídle
- počet sněžených sacharidů
- doba trvání aktivity
- tablety
- hmotnost
- krevní tlak.

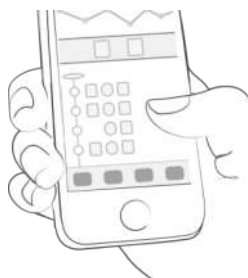


5.3 Vysvětlení pojmů, ikon a barev

1) Klepnutím na ikonu **lupy** na řídicím panelu můžete vyhledávat záznamy, značky, místa atd.

2) Klepnutím na **znaménko plus** přidáte záznam.



Barvy prvků na řídicím panelu (3) a příšerka (2) aktivně reagují na vaše úrovně glykémie během daného dne. Barva grafu se přizpůsobuje denní době (1).

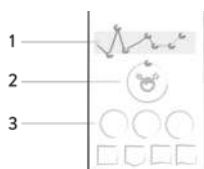

Každá ze značek na obrazovce nového záznamu popisuje určitou situaci, scénář, kontext, náladu nebo emoci. Přímo pod každou ikonou značky je uveden textový popis.




Barvy používané v proměnlivých částech aplikace mySugr odpovídají výše uvedenému popisu a vycházejí z cílových rozmezí zadaných uživatelem na obrazovce nastavení.

- Červená: Glykémie je mimo cílové rozmezí
- Zelená: Glykémie je v cílovém rozmezí
- Oranžová: Glykémie není dokonalá, ale je přijatelná



V aplikaci vidíte rozličné dlaždice v jedenácti různých tvarech:

- 1) Glykémie
- 2) Hmotnost
- 3) HbA1c
- 4) Ketony
- 5) Bolusový inzulín
- 6) Bazální inzulín
- 7) Tablety
- 8) Jídlo
- 9) Aktivita
- 10) Kroky
- 11) Krevní tlak

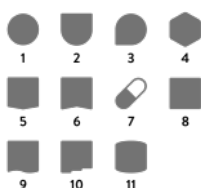

5.4 Účet

Pomocí nabídky „Více“ na panelu karet přejděte k možnosti „Účty a nastavení“.



Na tomto místě přizpůsobujete aplikaci vašim individuálním potřebám. Aby mohla aplikace mySugr řádně fungovat, potřebuje znát některé podrobnosti o tom, jak řídíte cukrovku. Výhodou je, že budete mít pohromadě všechny informace související s vaší cukrovkou!

Přejděte do první části a aktualizujte své osobní údaje.



V části „Moje předplatné“ můžete přejít z verze Basic na placené členství, které nabízí víc funkcí. Po přechodu na předplatné jej zde můžete spravovat.



Na obrazovce „Základní informace o léčbě“ můžete aktualizovat svůj typ cukrovky, rok diagnózy a pohlaví.

Na obrazovce „Testování glykémie“ nastavujete způsob měření. Můžete vybrat glukometr nebo senzor. Pokud se vám nedaří najít zařízení, které používáte, prozatím tu nic nevybírejte. Dejte nám o tom ale vědět, abychom ho mohli přidat do seznamu.

Na obrazovce „Léčba inzulínem“ konfiguruje všechno, co souvisí s léky. Pokud užíváte léky určené k perorálnímu podání (tablety), můžete zde zadat jejich názvy, které pak lze vybírat při vytváření nového záznamu. Pokud používáte inzulínovou pumpu, můžete zadat bazální dávky. Celkový bazální inzulín za dobu 24 hodin se zobrazuje v pravém horním rohu. Bazální dávka se zobrazuje v grafu, ale pokud chcete, můžete ji skrýt.

Na obrazovce „Jídlo“ najdete všechno, co souvisí se sacharidy. Změňte jednotku sacharidů podle toho, jak je počítáte.

Na obrazovce „Moje příšerka“ přepněte přepínač podle toho, zda chcete zapnout nebo vypnout zvuky příšerky, a aktualizujte jméno své příšerky.

Na obrazovce „Další nastavení“ přesunutím příslušného přepínače zadejte, zda chcete dostávat týdenní e-mailovou zprávu a/nebo novinky.



5.5 Chování aplikace při změně časového pásma

V grafu jsou položky protokolu řazeny podle času UTC. Časová stupnice grafu je nastavena na časové pásmo telefonu.

V seznamu jsou položky protokolu řazeny podle místního času a časový popis položky protokolu v seznamu je nastaven na časové pásmo, ve kterém byl záznam vytvořen.

Pokud byl záznam vytvořen v jiném časovém pásmu, než je aktuální časové pásmo telefonu, zobrazí se další popis, který signalizuje, v jakém časovém pásmu byl tento záznam vytvořen (viz časové posuny od pásma GMT, přičemž „GMT“ znamená Greenwichský střední čas).


6 Záznamy

6.1 Přidání záznamu

Otevřete aplikaci mySugr.



Klepněte na znaménko plus.

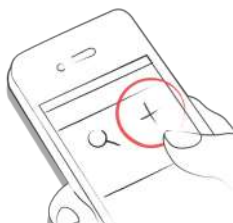

V případě potřeby změňte datum, čas a polohu.



Vyfotťte si jídlo.



Zadejte podrobné údaje o glykémii, sacharidech, výživě,

inzulínu, tabletách, aktivitě, hmotnosti, hodnotě HbA1c, ketonech a případné poznámky.



Vyberte značky.



Klikněte na ikonu připomínky a zadejte požadovaný čas, kdy chcete být upozorněni na další měření hladiny glykémie (mySugr Pro).



Uložte záznam.



Zvládli jste to!



6.2 Upravte záznam

Klepněte na záznam, který chcete upravit, nebo potáhněte prstem doprava a klepněte na tlačítko Upravit.



Upravte záznam.



Klepnutím na tlačítko „Uložit“ uložíte změny, nebo se klepnutím na tlačítko „Zrušit“ vrátíte zpět.



6.3 Odstranění záznamu

Klepněte na záznam, který chcete odstranit, nebo záznam odstraňte potáhnutím prstem doprava.



Odstraňte záznam.




6.4 Vyhledání záznamu

Klepněte na lupu.




K získání požadovaných výsledků vyhledávání použijte filtr.

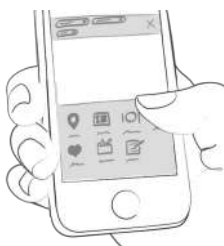

6.5 Viz předchozí záznamy

Chcete-li zobrazit více dat, můžete posouvat záznamy nahoru a dolů nebo můžete táhnout graf doleva a doprava.

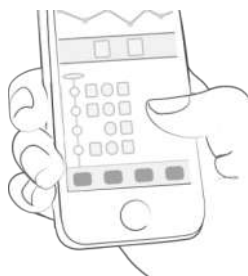

7 Získávání bodů

Body dostáváte za všechno, co pro sebe uděláte. Cílem je každý den zaplnit kruh s body.



Kolik bodů získám?

- **1 bod:** značky, více fotek, tablety, poznámky, značky jídel
- **2 body:** glykémie, záznam o jídle, poloha, bolus (inzulínová pumpa) / krátkodobě účinkující inzulín (inzulínové pero / stříkačka), popis jídla, dočasná bazální dávka (inzulínová pumpa) / dlouhodobě účinkující inzulín (inzulínové pero / stříkačka), krevní tlak, hmotnost, ketony
- **3 body:** první fotka, aktivita, popis aktivity, HbA1c



Získejte 50 bodů denně a zkrotte příšerku Cukrovku!



8 Odhad HbA1c

Na domovské obrazovce se zobrazuje odhadovaná hodnota HbA1c – za předpokladu, že jste zapsali dostatek hodnot glykémie (více se o tom dozvíte později). Upozornění: Tato hodnota je pouze odhad založený na zapsaných hladinách glykémie. Tento výsledek se může lišit od výsledků zjištěných laboratorně.

Pro výpočet odhadované hodnoty HbA1c potřebuje Deník mySugr průměrně 3 hodnoty glykémie denně po dobu alespoň 7 dní. Chcete-li získat přesnější odhad, zadejte více hodnot.

Maximální délka období, pro které lze provést výpočet, je 90 dní.

9 Doručená pošta

9.1 Koučink

Vyhledejte koučování výběrem možnosti „Doručené“ v nabídce na panelu karet (v zemích, kde je tato služba dostupná).



Klepnutím sbalíte nebo rozbalíte zprávy. Můžete tu číst a posílat zprávy.



Odznaky indikují nepřečtené zprávy.



9.2 Profesionální zdravotník


Vyhledejte profesionálního zdravotníka výběrem možnosti „Doručené“ v nabídce na panelu karet (v zemích, kde je tato služba dostupná).



Klepnutím na poznámku/komentář v seznamu zobrazíte poznámku/komentáře od profesionálního zdravotníka. Rovněž máte možnost odpovědět prostřednictvím komentářů na poznámku profesionálního zdravotníka.



Odznak na ikoně doručené pošty a zvýrazněný název v seznamu doručené pošty označují nepřčtenou poznámku.

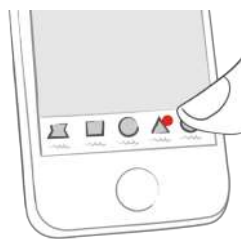

Nejnovější zprávy jsou zobrazeny na začátku seznamu.



Neodeslané komentáře jsou označeny následujícími varovnými ikonami:

Probíhá odesílání komentáře



Komentář nebyl doručen



10 Výzvy

Výzvy najdete přes nabídku „Více“ v panelu karet.



Výzvy se většinou zaměřují na dosažení cílů souvisejících s vylepšením celkového zdravotního stavu nebo kontroly nad cukrovkou, například na častější kontrolování glykémie nebo

větší množství fyzické aktivity.



11 Importování dat

11.1 Import dat prostřednictvím Bluetooth

Chcete-li importovat data ze svého zařízení, musíte jej nejdříve připojit k aplikaci mySugr.

Před připojením zkontrolujte, není-li vaše zařízení již připojeno k vašemu smartphonu. Pokud je připojeno, přejděte k nastavení Bluetooth ve smartphonu a zařízení odstraňte.

Pokud to vaše zařízení umožňuje, odstraňte rovněž předchozí spárování se smartphonem z nastavení svého zařízení. Může způsobit chyby (platí pro Accu-Chek Guide).



V nabídce vyberte možnost „Připojení“.



Ze seznamu vyberte vaše zařízení.



Klepněte na „Připojit“ a postupujte dle pokynů zobrazených v aplikaci mySugr.



Po úspěšném spárování vašeho zařízení se hodnoty automaticky synchronizují s aplikací mySugr. Tato synchronizace probíhá pokaždé, když je spuštěna aplikace mySugr, na telefonu je aktivována funkce Bluetooth a pracujete se zařízením tak, že dochází k odesílání dat.



Zjištěné duplicitní záznamy (například naměřená hodnota z paměti glukometru, kterou jste rovněž ručně zadali do aplikace mySugr) se automaticky sloučí.

K tomu dojde pouze v případě, kdy ruční záznam odpovídá importovanému záznamu z hlediska množství a data/času.

UPOZORNĚNÍ: Hodnoty importované z připojených zařízení nelze změnit!

11.1.1 Glukometry



Extrémně vysoké nebo nízké hodnoty jsou odpovídajícím způsobem označeny: U hodnot pod 20 mg/dL se zobrazuje značka Lo, u hodnot přes 600 mg/dL značka Hi. To samé platí pro ekvivalentní hodnoty v mmol/L.



Po importování všech dat můžete provádět živé měření. Přejděte na domovskou obrazovku aplikace mySugr a pak vložte do glukometru testovací proužek.



Jakmile vás k tomu glukometr vyzve, aplikujte na testovací proužek vzorek krve a počkejte na výsledek jako obvykle. Hodnota se přenesení do aplikace mySugr společně s aktuálním datem a časem. Pokud chcete, můžete k záznamu přidat doplňující informace.



UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda jednotky zobrazené na zařízení (např. mg/dL nebo mmol/L) odpovídají jednotkám nastaveným v aplikaci mySugr, aby nedošlo ke zmatkům.

11.1.2 Párování několika glukometrů stejného typu

V menu vyberte „Připojení“. Vyberte své zařízení ze seznamu. Klikněte na tlačítko „Připojit další glukometr“ a postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci mySugr.

11.2 Importování dat CGM

11.2.1 Importování dat z CGM prostřednictvím aplikace Zdraví (pouze iOS)

Zajistěte, aby byla v nastaveních aplikace mySugr zapnuta aplikace Zdraví a aby bylo v nastavení aplikace Zdraví zapnuto sdílení glykémie. Otevřete aplikaci mySugr a data z CGM se zobrazí v grafu.

*Poznámka k systémům Dexcom: V aplikaci Zdraví se sdílené informace o glukóze zobrazují s tříhodinovou prodlevou. Informace o glukóze se tedy nezobrazují v reálném čase.

11.2.2 Skrytí dat z CGM

Dvakrát klepněte na graf. Tím otevřete doplňkový ovládací panel, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout viditelnost dat z CGM v grafu.

11.3 Importujte data prostřednictvím NFC (Near Field Communication) (pouze pro systém iOS)

11.3.1 Spárujte své NFC pero

V nabídce vyberte možnost Připojení.



Za seznamu vyberte své NFC pero.



Klepněte na „Připojit“ a postupujte dle pokynů zobrazených v aplikaci mySugr.



Po úspěšném připojení NFC pera ho budete moci snímat a importovat jeho data.

11.3.2 Snímání NFC pera (pouze pro systém iOS)

Chcete-li snímat své NFC pero, přejděte v aplikaci mySugr do části „Můj trend“ a klepněte v horní části na ikonu pera.



Přiblížte pero k horní straně iPhone a ponechte jej zde, dokud se na spodní straně nezobrazí symbol zaškrtnutí.



11.4 Označování odvdzušňovacích dávek (připojené pero)

Před vstříknutím inzulínu se můžete rozhodnout vytlačit z jehly veškerý vzduch. Toto označujeme jako plnicí nebo „odvdzušňovací“ dávku.

Připojené pero není samo o sobě schopné zaznamenat rozdíl mezi odvdzušňovací dávkou a injekcí inzulínu.

Abychom vám pomohli sledovat odvdzušňovací dávky v aplikaci mySugr, zavedli jsme automatické a ruční označování odvdzušňovacích dávek.

11.4.1 Automatické označení odvdzušňovacích dávek (připojené pero)

Po importu injekce z připojeného pera můžete zvolit nastavení k automatickému označování odvdzušňovacích dávek.



Máte k dispozici tyto možnosti:

1) „Neoznačovat automaticky“ Odvdzušňovací dávky nebudou označovány automaticky.

2) „Označit každou injekci do 1 jednotky“ Všechny injekce do 1 jednotky inzulínu budou označeny jako odvdzušňovací dávky.

3) „Označit každou injekci do 2 jednotek“ Všechny injekce do 2 jednotek inzulínu budou označeny jako odvdzušňovací dávky.

4) „Označit každou injekci do 3 jednotek“ Všechny injekce do 3 jednotek inzulínu budou označeny jako odvdzušňovací dávky.

11.4.2 Ruční označení odvdzušňovacích dávek (připojené pero)

Chcete-li ručně označit importovanou injekci jako odvdzušňovací dávku, **klepněte na ikonu inzulínu** a vyberte možnost „označit jako odvdzušňovací dávku“.



Chcete-li ručně označit odvdzušňovací dávku jako injekci, **klepněte na ikonu odvdzušňovací dávky** a vyberte možnost „Označit jako injekci“.

12 Exportování dat

V nabídce na panelu karet vyberte možnost „Zprávy“ nebo „Moje data“.



V případě potřeby změňte formát souboru a období (mySugr PRO) a klepněte na tlačítko „Export“. Jakmile se na vaší obrazovce zobrazí export, klepněte na tlačítko v pravém horním rohu (od iOS 10 v levém dolním rohu) pro přístup k možnostem pro odeslání a uložení.



13 Aplikace Zdraví

Aplikaci Zdraví můžete aktivovat v systému iOS v nabídce panelů karet v položce „Připojení“.

Aplikace Zdraví umožňuje sdílet data mezi aplikací mySugr a dalšími zdravotními aplikacemi.



14 Statistika

Pokud na denním přehledu potáhnete prstem doleva, přejdete na zobrazení statistiky.



Přejdete na přehled za posledních 7 dnů. Pokud prstem znovu potáhnete doleva, přejdete na 14denní přehled.



Zobrazované období indikují tečky. Pokud prstem znovu potáhněte doleva, zobrazí se měsíční přehled. Zde můžete dokonce zobrazit i čtvrtletní přehled!



Pokud chcete zobrazit grafy s daty z minulosti, potáhněte prstem dolů.



V modré části se zobrazuje průměrný počet denních záznamů, celkový počet záznamů a počet nasbíraných bodů.



15 Deinstalace

Klepněte a přidržte prst na ikoně aplikace mySugr, dokud se ikona nezačne třást. Klepněte na malé „x“, které se zobrazí v horním rohu. Zobrazí se zpráva s žádostí o potvrzení deinstalace (stisknutím tlačítka „Smazat“) nebo její zrušení (stisknutím tlačítka „Zrušit“).



16 Odstranění účtu

Pomocí nabídky „Více“ na panelu karet přejděte k možnosti „Účet a nastavení“ a klepněte na „Další nastavení“.

Klepněte na „Odstranit můj účet“ a poté stiskněte „Odstranit“. Otevře se dialogové okno. Stisknutím tlačítka „Odstranit“ s konečnou platností potvrďte odstranění, nebo akci zrušte tlačítkem „Zrušit“.



Upozorňujeme, že při klepnutí na tlačítko „Odstranit“ budou smazána všechna vaše data a že tuto akci nelze vrátit zpět. Váš účet bude odstraněn.

17 Zabezpečení dat

Vaše data jsou u nás v bezpečí – to je pro nás velice důležité (vždyť aplikaci mySugr sami používáme). Zabezpečení dat a ochrana osobních údajů je v aplikaci mySugr implementována v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů, které jsou součástí [Podmínek používání a licence](#).

18 Podpora

18.1 Řešení problémů

Záleží nám na vás. Vaše otázky, starosti a obavy proto řeší naši kolegové cukrovkáři.

Rychlé pokyny pro řešení problémů najdete na naší [stránce s častými dotazy](#)

18.2 Podpora

Pokud máte dotazy k aplikaci mySugr, potřebujete s ní pomoci nebo odhalíte nějakou chybu či problém, neprodleně nás kontaktujte e-mailem na adrese support@mysugr.com.

Také nám můžete zatelefonovat:

- + 1 (855) 337-7847 (bezplatná linka v USA)
- + 44 800-011-9897 (bezplatná linka ve Spojeném království)
- + 43 720 884555 (Rakousko)
- + 49 32 211 001999 (Německo)

V případě závažného incidentu v souvislosti s používáním deníku mySugr kontaktujte zákaznickou podporu mySugr a příslušný místní úřad.

19 Výrobce



mySugr GmbH
Trattnerhof 1/5 OG
A-1010 Vídeň, Rakousko

Telefon:

+1 (855) 337-7847 (USA, bezplatná linka),
+44 800-011-9897 (Spojené království, bezplatná linka),
+43 720 884555 (Rakousko)
+49 32 211 001999 (Německo)

E-mail: support@mysugr.com

Výkonná ředitelka: Elisabeth Koelbel
Registrační číslo výrobce: FN 376086v
Sídlo soudu: Obchodní soud Vídeň, Rakousko
DIČ: ATU67061939



2024-04-03

Verze brožurky uživatele 3.93.0 (cs)



20 Informace o zemi

20.1 Austrálie

Australský sponzor:
Roche Diabetes Care Australia
2 Julius Avenue
North Ryde NSW 2113

20.2 Brazílie

Registrující/notifikující subjekt: Roche Diabetes Care Brasil
Ltda.
CNPJ: 23.552.212/0001-87
Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 691 - 2º andar - Várzea de
Baixo - São Paulo/SP - CEP: 04730-903 - Brasil
Technická podpora: 0800 77 20 126
www.accu-chek.com.br
Reg. ANVISA: 81414021706

20.3 Království Saúdské Arábie a Katar

Následující funkce nejsou v arabštině podporovány:

- denní statistiky,
- statistiky.

Poznámka: Arabština není podporována mimo Království Saúdské Arábie a Katar.

20.4 Filipíny

CDRRHR-CMDN-2022-945733

Imported and Distributed by:

Roche (Philippines) Inc.

Unit 801 8th Flr., The Finance Centre

26th St. corner 9th Avenue

Bonifacio Global City, Taguig

20.5 Švýcarsko

CH-REP

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG

Forrenstrasse 2

CH-6343 Rotkreuz